


- **Abra el capuchón protector** (tapa) levantando el borde delantero - Tire del capuchón protector (tapa) hacia arriba alejándolo de la base para dejar al descubierto la boquilla.



- **Abra la boquilla** tirando del borde de la boquilla hacia arriba y lejos de la base para que se vea la cámara central.

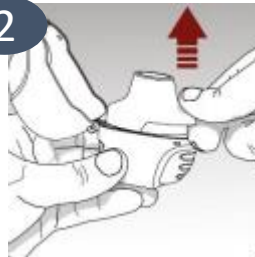


- **Extraiga una cápsula** del blíster y coloque la cápsula en la cámara central del inhalador de polvo seco.
- No importa qué lado de la cápsula esté hacia arriba o hacia abajo.



- **Cierre la boquilla** firmemente contra la base hasta que escuche un clic. Deje abierto el capuchón protector (tapa).



- **Sostenga el inhalador** de polvo seco con la boquilla apuntando hacia arriba.
- **Presione el botón** de perforación completamente y **una sola vez** hasta que se detenga y a continuación, suéltelo.

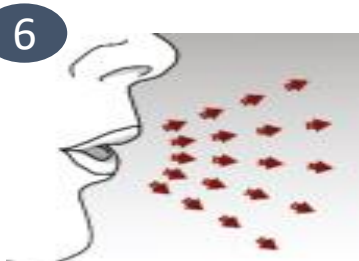


- **Exhale** completamente en 1 respiración, vaciando sus pulmones de aire.
- Importante: No respire dentro de su inhalador de polvo seco.

7



- **Mantenga** la cabeza en **posición vertical** mientras mira al frente
- **Levante el inhalador de polvo seco** hasta la boca en posición horizontal. No bloquee las rejillas de entrada de aire.
- **Cierre los labios** con fuerza alrededor de la boquilla.
- **Respire lentamente** hasta que sus pulmones estén llenos y oiga o note que la cápsula vibra
- **Aguante la respiración** durante unos segundos y, al mismo tiempo, saque el inhalador de polvo seco de la boca.
- **Respire de forma normal** de nuevo. Continúe respirando normal. Repita el paso 4 una vez para vaciar la cápsula por completo.

8

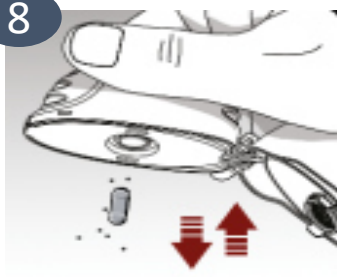

- Después de la toma de su dosis diaria, **abra la boquilla** y saque la cápsula depositándola en la basura
- **Elimine los trozos de la cápsula o el polvo** acumulado girando el inhalador de polvo seco y colocándolo hacia abajo y golpeándolo suavemente, pero con firmeza
- **Cierre la boquilla** y el capuchón protector para guardarlo