


# INSTRUCCIONES DE USO METOTREXATO en PLUMA PRECARGADA

Marcas comerciales: **METOJECT PEN, NORDIMET**

- ✓ Lea detenidamente **el prospecto** del medicamento
- ✓ **Solo se debe usar una vez por semana.** Los errores de dosificación en el uso pueden producir efectos adversos graves

## ANTES de la inyección:

1. **LÁVESE** bien las manos con agua y jabón
2. Los mejores **LUGARES PARA LA INYECCIÓN** son:
  - la parte superior del muslo
  - el abdomen, salvo el área alrededor del ombligo
- Cambie el lugar de aplicación en cada inyección. Esto puede reducir el riesgo de desarrollar irritaciones en el lugar de la inyección

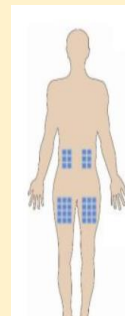

- Nunca aplique la inyección en piel dolorosa, amoratada, enrojecida, endurecida, o con cicatrices o estrías.

3. **LIMPIE** su piel en la zona elegida para la inyección con la toallita impregnada de alcohol incluida

## DESPUÉS de la inyección:

Una vez haya sido utilizada, **DEPOSITE** la pluma en el Punto SIGRE de la farmacia


## CONSERVACIÓN de las plumas:

Conservar por debajo de 25 °C

Conservar las plumas precargadas en el embalaje exterior para protegerlas de la luz

# INSTRUCCIONES DE USO METOTREXATO en PLUMA PRECARGADA


## 1. PREPARACIÓN

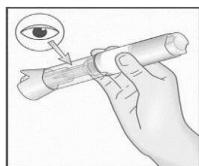


**Examinar** la pluma para asegurarse que no tiene ningún daño

Desinfectar la zona de inyección elegida con la toallita impregnada con alcohol

## 2. RETIRAR el capuchón

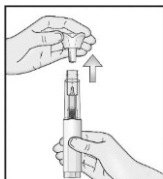


Metoject

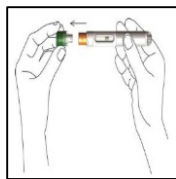


Nordimet

**Sostenga la pluma** como indica la imagen. Use la otra mano para quitar con suavidad la tapa en línea recta (no la doble ni la gire)

## 3. Forme un PLIEGUE

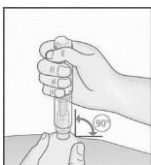


Metoject

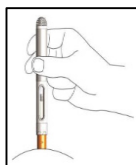


Nordimet

**Forme un pliegue** de piel apretando con cuidado la zona limpia en el lugar de inyección. Coloque la pluma perpendicular a la piel, con el protector apuntando al lugar de inyección

## 4. POSICIÓN

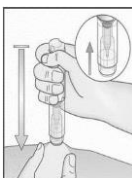

Metoject

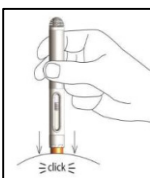


Nordimet


**Metoject:** Empuje la pluma firmemente sobre la piel para desbloquear el botón

**Nordimet:** Desplace la pluma hacia el lugar de la inyección con el protector de la aguja apuntando directamente a ese lugar

## 5. INYECCIÓN

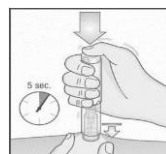

Metoject

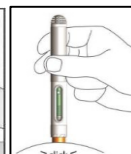


Nordimet


**Metoject:** Apriete el botón con el pulgar hasta escuchar el clic. Espere **5 seg** hasta que se haya inyectado todo el líquido

**Nordimet:** Aplique presión hacia abajo hasta oír un clic. Una vez que se haya completado la inyección, oírá un segundo clic (**10seg** aprox) Espere 2-3 segundos más antes de retirar la pluma de la piel

## 6. RETIRAR

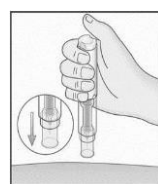

Metoject

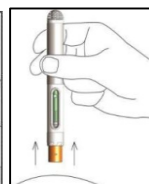

Nordimet

**Retire la pluma** del lugar de la inyección, perpendicular a la piel. La cubierta protectora se desplaza automáticamente sobre la aguja bloqueándola